

BR Biofilm-Reinigungsgerät

Gerätedokument
Einbau, Betrieb und Wartung

BR Biofilm removing system

Equipment Logbook
Assembly, operation and maintenance

BR Système d'élimination du biofilm

Livret d'appareil
Installation, fonctionnement et entretien

BR Sistema eliminazione biofilm

Verbale d'installazione
Montaggio, funzionamento e manutenzione

IT

BIOFILM REINIGUNGSGERÄT

 **METASYS**

BR Sistema eliminazione biofilm · GREEN&CLEAN BR · La fornitura comprende

Personale dell'ambulatorio, personale tecnico



1. BR Sistema eliminazione biofilm

Con l'apparecchiatura METASYS BR si riesce ad eliminare il biofilm dalle condotte del riunito dentale.

Caratteristiche del prodotto

- Semplice da montare
- Facile da usare (il liquido detergente è automaticamente introdotto dal BR nel riunito)
- Tempo d'azione: da ½ ora a 1 ora max.
- L'apparecchiatura del BR è utilizzabile solo con il liquido METASYS GREEN&CLEAN BR!
- Secondo il tipo di riunito si ha bisogno di 500 fino a 1000 ml GREEN&CLEAN BR (circa un flacone)
- Soluzione pronta all'uso e biodegradabile secondo la normativa CE 84/449
- Tensione di alimentazione 230 V AC
- Marcatura CE



2. GREEN&CLEAN BR

Soluzione al 4% per l'eliminazione del biofilm dalle condotte idriche di riuniti dentali. Da usarsi con l'apparecchiatura METASYS BR per la bonifica del riunito da parte del tecnico autorizzato METASYS; è consigliabile la pulizia prima dell'installazione dei sistemi di decontaminazione WEK / WEK Light.

Spettro d'azione: Per l'eliminazione del biofilm dalle condotte idriche.

Raccomandazioni di sicurezza: Evitare il contatto con occhi e pelle. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.

La preparazione non è classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 1999/45/CE. Il prodotto non è dichiarato pericoloso ai sensi della direttiva (EC) 1272/2008 [GHS].

Composizione: 4% perossido d'idrogeno, acqua, colorante.



3. La fornitura comprende



BR Sistema eliminazione biofilm Codice: 40050501	BR Sistema eliminazione Biofilm + 1 x flacone da 1000 ml di soluzione GREEN&CLEAN BR
GREEN&CLEAN BR Codice: 60040300	2 x flaconi da 1000 ml di soluzione GREEN&CLEAN BR

Utilizzazione

Personale dell'ambulatorio, personale tecnico

4. Utilizzazione

- 4.1 Staccare tutti gli strumenti onde evitare intasamenti, togliere il coperchio.
- 4.2 Collegare il flacone del GREEN&CLEAN BR con il beccuccio.
- 4.3 Staccare connettore.
- 4.4 Collegare l'apparecchiatura del BR con l'ingresso dell'acqua del riunito.
- 4.5 Aprire il rubinetto.
- 4.6 Attivare con l'interuttore il BR.
- 4.7 Quando il liquido viola fuoriesce dalla parte degli strumenti disattivare il BR.
- 4.8 Chiudere rubinetto.
- 4.9 Staccare il BR dall'ingresso acqua del riunito. Togliere il beccuccio dal flacone del GREEN&CLEAN BR, rimettere il coperchio.
- 4.10 Tempo d'azione del liquido varia da 30 a max. 60 minuti. Dipende dal carico di biofilm all'interno del riunito. Alla fine del tempo d'azione sciacquare il riunito fino a quando fuoriesce acqua pulita.

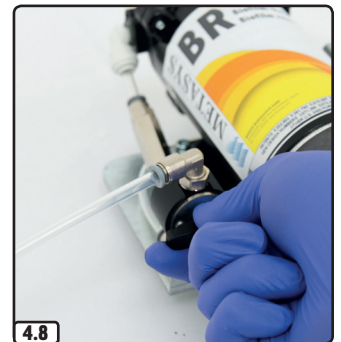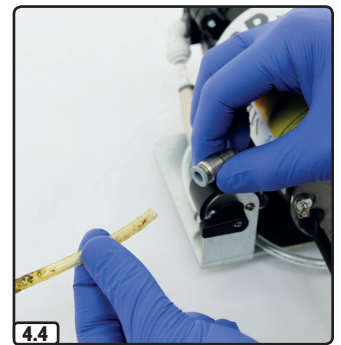

METASYS ... makes the difference!

Visit us at:



METASYS Medizintechnik GmbH
Florianstraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria

 +43 512 205420 |  +43 512 205420 7

www.metasys.com | info@metasys.com



GERMANY
+49 8823 938 44 33
info@metasys.com

FRANCE
+33 4 37 90 22 15
info@metasys.fr

ITALY
+39 045 981 4477
desitalia@metasys.com