

BR Biofilm-Reinigungsgerät

Gerätedokument
Einbau, Betrieb und Wartung

BR Biofilm removing system

Equipment Logbook
Assembly, operation and maintenance


BR Système d'élimination du biofilm

Livret d'appareil
Installation, fonctionnement et entretien

BR Sistema eliminazione biofilm

Verbale d'installazione
Montaggio, funzionamento e manutenzione

BIOFILM REINIGUNGSGERÄT

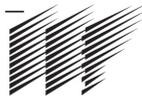**METASYS**

BR Biofilm-Reinigungsgerät · GREEN&CLEAN BR · Lieferformen

Praxispersonal, Techniker

DE



1

1. BR Biofilm-Reinigungsgerät

Das METASYS BR Biofilm-Reinigungsgerät entfernt Biofilm aus dem Schlauchsystem der dentalen Einheit.

Wichtige Produktmerkmale

- Einfach anzuschließen
- Einfach zu handhaben (Reinigungslösung wird automatisch in die jeweilige Behandlungseinheit gepumpt)
- Kurze Einwirkzeit: ½ Stunde bis max. 1 Stunde
- Nur in Kombination mit METASYS GREEN&CLEAN BR verwendbar!
- Je nach Behandlungseinheit werden 500 bis 1000 ml GREEN&CLEAN BR benötigt (entspricht ungefähr einer Flasche)
- Biologisch abbaubar nach der EWG-Richtlinie 84/449
- 230 Volt Betriebsspannung
- CE-Zeichen



2

2. GREEN&CLEAN BR

GREEN&CLEAN BR ist eine 4%-ige Lösung auf Wasserstoffperoxidbasis zur Entfernung von Biofilm in einer Dentaleinheit. In Verbindung mit dem METASYS BR Biofilm-Reinigungsgerät wird GREEN&CLEAN BR zur Sanierung dentaler Einheiten sowie vor der Installation eines Wasserentkeimungssystems empfohlen.

Wirkungsspektrum: Zur Entfernung von Biofilm aus dentalen Einheiten.

Sicherheitsempfehlung: Haut- und Augenkontakt vermeiden. Von Kindern fernhalten. Nicht einnehmen.

Die Zubereitung ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

Zusammensetzung: 4% Wasserstoffperoxid, Wasser, Farbstoff.



3

3. Lieferformen




BR Biofilmreinigungsgerät BestellNr.: 4005051	Biofilmreinigungsgerät + 1 x 1000 ml Flasche GREEN&CLEAN BR Reinigungslösung
GREEN&CLEAN BR BestellNr.: 60040300	2 x 1000 ml Flaschen GREEN&CLEAN BR Reinigungslösung

Anwendung

Praxispersonal, Techniker

4. Anwendung

- 4.1 Alle Wasserverbraucher der dentalen Einheit entfernen (Schutz vor Verstopfungen).
Die Verschlusskappe abziehen.
- 4.2 Die mitgelieferte GREE&CLEAN BR-Flasche mit dem Adapter zusammenstecken.
- 4.3 Den Verschlussstecker abstecken.
- 4.4 Den Wassereingang der dentalen Einheit an das METASYS BR Biofilm-Reinigungsgerät anstecken.
- 4.5 Den Einlasshahn öffnen.
- 4.6 Das Reinigungsgerät einschalten.
- 4.7 Sobald die violette Flüssigkeit an den Verbrauchern austritt, das Reinigungsgerät wieder ausschalten.
- 4.8 Den Einlasshahn schließen.
- 4.9 Den Wassereingang der dentalen Einheit vom Reinigungsgerät trennen. Den Adapter von der GREEN&CLEAN BR-Flasche entfernen, und die Verschlusskappe und den Verschlussstecker wieder anstecken.
- 4.10 Je nach Verschmutzung der dentalen Einheit, kann die Einwirkdauer zwischen 30 Minuten bis max. 60 Minuten andauern. Nach Beendigung der Einwirkzeit, alle Wasserverbraucher betätigen, bis klares Wasser austritt.

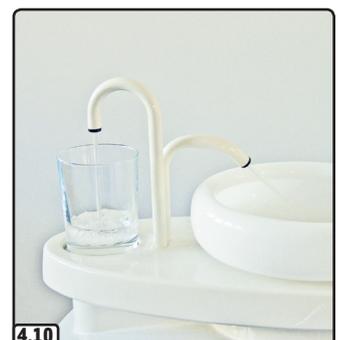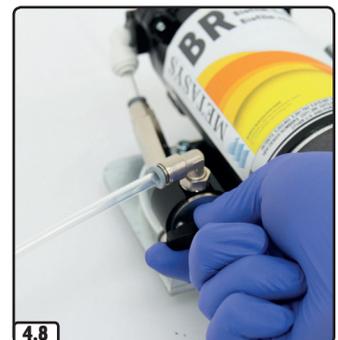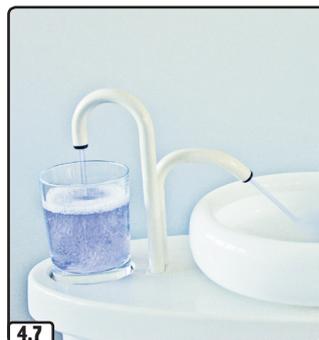

DE

METASYS ... makes the difference!

Visit us at:



METASYS Medizintechnik GmbH
Florianstraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria

 +43 512 205420 |  +43 512 205420 7

www.metasys.com | info@metasys.com



GERMANY
+49 8823 938 44 33
info@metasys.com

FRANCE
+33 4 37 90 22 15
info@metasys.fr

ITALY
+39 045 981 4477
desitalia@metasys.com